

BRUKSANVISNING

Inbrija® 33 mg levodopa inhalationspulver, hårda kapslar



THERAPEUTICS


BRUKSANVISNING:

Läs igenom dessa anvisningar innan du börjar använda Inbrija.

Översikt




- Kontrollera att händerna är rena och torra när du använder inhalatorn och kapslarna.
- Ta ut kapslarna ur blisteret precis innan de ska användas.
- En komplett dos är 2 kapslar som tas efter varandra.
- Ladda 1 kapsel i Inbrija-inhalatorn, slut läpparna ordentligt runt munstycket, andas därefter in (inhalera) och håll andan i 5 sekunder. Du ska höra att kapseln "snurrar". Ta därefter ut den använda kapseln och ladda en andra kapsel i inhalatorn. Slut läpparna ordentligt runt munstycket, andas in (inhalera) och håll på nytt andan i 5 sekunder.
- Du ska inhalera innehållet i den andra kapseln inom 10 minuter efter den första kapseln..
- Ladda inte 2 kapslar samtidigt.
- Kassera alla använda kapslar omedelbart efter användning.
- Kassera inhalatorn efter att du har använt alla kapslar i kartongen.

Inbrija-inhalatorns beståndsdelar

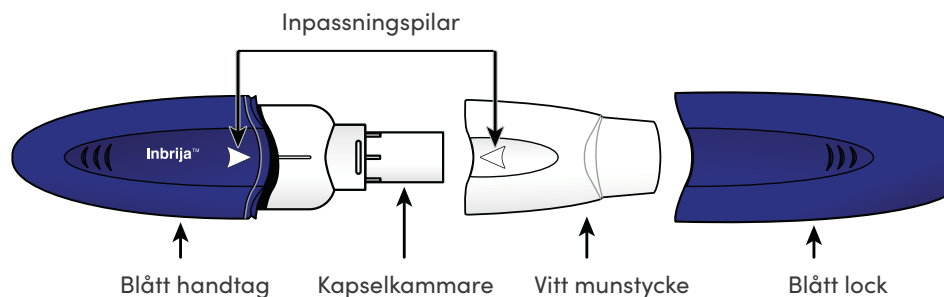


Kapslar

Varje kartong innehåller blister med 4 kapslar. Förbered och använd totalt 2 kapslar. Hel dos = 2 kapslar. Använd en kapsel i taget.

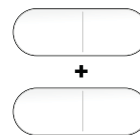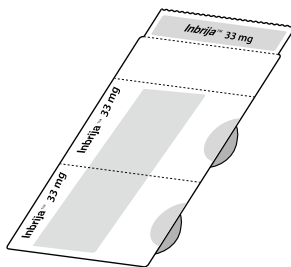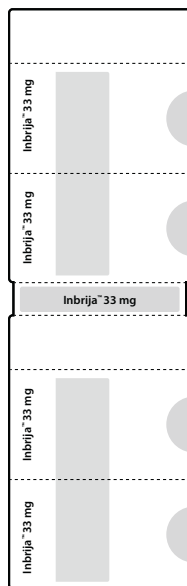

FÖRBERED DOSEN

STEG 1: Samla ihop det du behöver

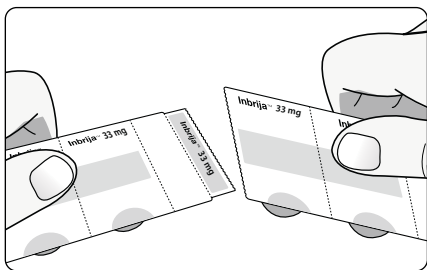

Hitta en ren och torr yta.


Kontrollera att händerna är rena och torra.

Ta fram inhalator och strip med kapslar.

Riv av 2 kapslar från förpackningen.

En hel dos är 2 kapslar.


STEG 2: Ta bort det blå locket på inhalatorn

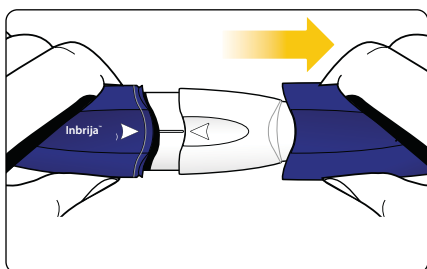

Dra locket rakt ut.

Lägg locket åt sidan. Du behöver det senare för att förvara inhalatorn.


STEG 3: Vrid och dra av det vita munstycket

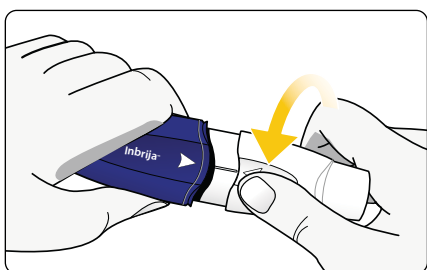

Vrid och dra av munstycket för att ta loss det från handtaget.

Placera munstycket och inhalatorn på en ren och torr yta.

STEG 4: Ta ut 1 kapsel från förpackningen

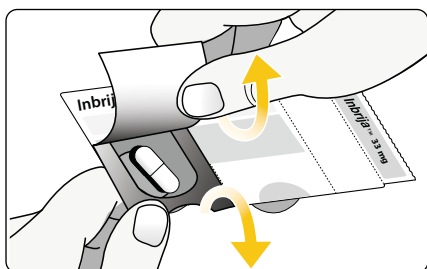


Riv försiktigt av folien och ta ut 1 kapsel.

Ta bara ut 1 kapsel i taget, och precis före användning.

Använd inte en kapsel som verkar krossad, skadad eller våt. Kassera den och ta ut en ny kapsel.

STEG 5: Ladda kapsel

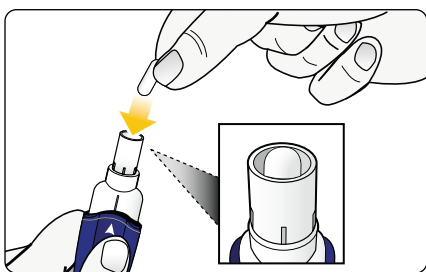


Håll inhalatorn upprätt i handtaget.


Lägg ned 1 kapsel i öppningen på kapselkammaren.

Ladda inte 2 kapslar samtidigt.

STEG 6: Anslut det vita munstycket

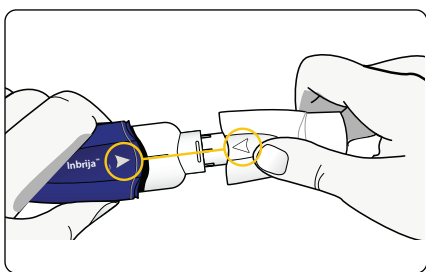


Passa in de vita pilarna på handtaget och munstycket.

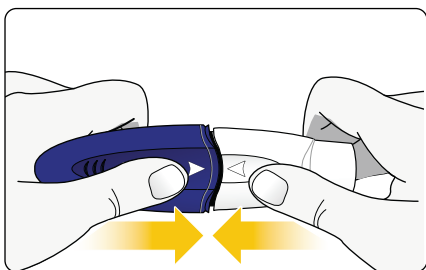

Tryck ihop munstycket och handtaget ordentligt tills du hör ett klickljud. Detta punkterar kapseln.

Tryck inte ihop handtaget och munstycket mer än en gång.

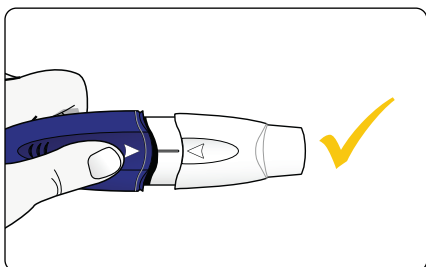

Släpp munstycket. Munstycket fjädrar tillbaka och är anslutet.


INHALATORN ÄR NU REDO ATT ANVÄNDAS

Tryck inte ihop handtaget och munstycket mer än en gång. Detta kan skada kapseln och du kanske inte får en hel dos. Om detta inträffar, börja om från steg 4 med en ny kapsel.

Kontrollera att munstycket sitter fast ordentligt och inte ramlar av innan du går vidare till steg 7.

TA DIN DOS

STEG 7: Håll inhalatorn bort från dig och andas ut

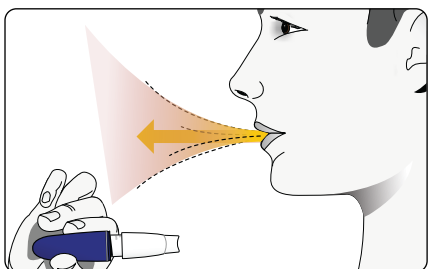


Stå eller sitt med huvudet och bröstet upprätt.

Håll inhalatorn vågrätt och bort från munnen.

Andas ut helt.

Andas inte i munstycket.

STEG 8: Andas in djupt för att inhalera pulver

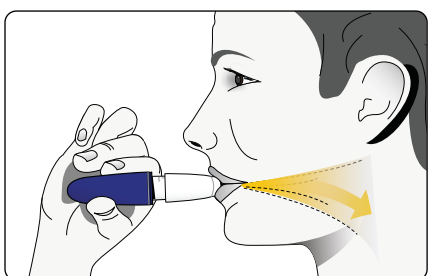

Håll inhalatorn vågrätt och slut läpparna ordentligt runt munstycket.


Ta ett djupt, behagligt andetag tills lungorna känns fulla. Detta tar vanligtvis flera sekunder.

När du andas in, kommer du att höra och känna hur kapseln "snurrar" (roterar). Rotationen innebär att inhalatorn fungerar och att du får läkemedlet.

Om du hostar eller avbryter doseringen, börja om från steg 7 med samma kapsel.

Viktigt! Om du inte hör eller känner att kapseln "snurrar" när du inhalarar måste du ta ett djupare, längre andetag eller kan behöva rengöra munstycket (skölj inte munstycket och se till att inhalatorn inte blir våt). Se steg 13 – Rengöra munstycket. Börja om från steg 7 med samma kapsel.


STEG 9: Håll andan under 5 sekunder och andas sedan ut

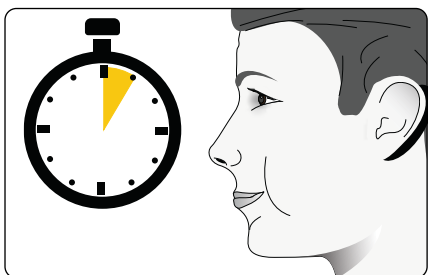


Ta ut inhalatorn ur munnen och håll andan under 5 sekunder.

Andas sedan ut.

STEG 10: Ta ut kapseln ur inhalatorn

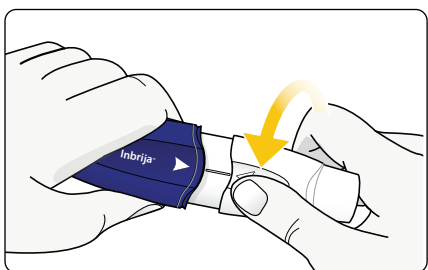


Vrid och dra av munstycket.

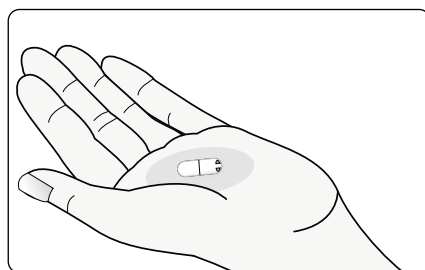

Ta ut den använda kapseln.


STEG 11: Dosera med den andra kapseln

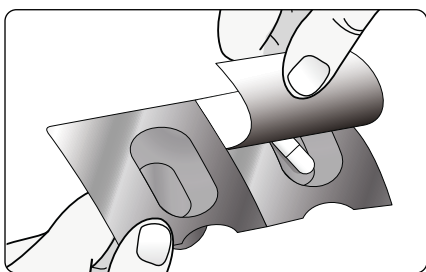

Upprepa steg 4 till 10 med den andra kapseln för att få hela dosen.

Du ska inhalera innehållet i den andra kapseln inom 10 minuter efter den första.

STEG 12: Kassera använda kapslar

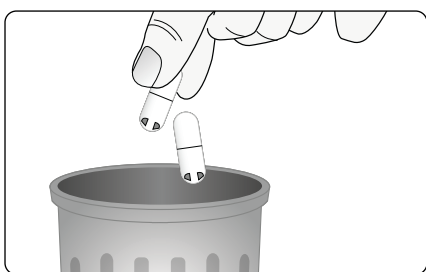

Kassera använda kapslar enligt gällande anvisningar.

STEG 13: Rengör munstycket

Det är normalt att en del pulver blir kvar i eller på inhalatorn. Ta vid behov bort pulver från munstyckets hål med en ny, torr bomullspinne och med en cirkelrörelse för att förhindra ansamling av pulver.




Rengör hålen på munstycket ovanifrån.




Rengör hålen på munstycket underifrån.

- Du kan också använda en torr pappershandduk för att vid behov torka av munstyckets utsida.
- **Rengör inte några andra delar av inhalatorn.**
- **Skölj inte munstycket och se till att inhalatorn inte blir våt.**


STEG 14: Förvara inhalatorn

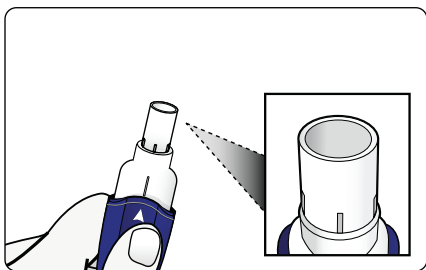


Kontrollera att det inte finns några kapslar i inhalatorn innan du förvarar den.

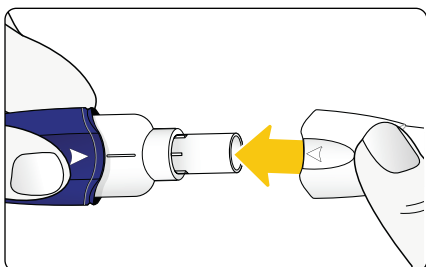

Anslut munstycket till handtaget genom att trycka tills du hör ett klickljud.

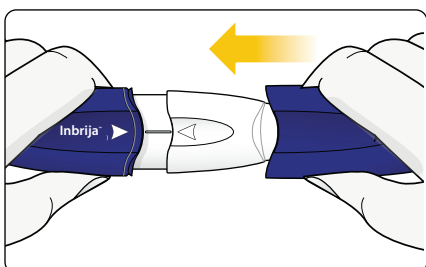

Sätt på locket på munstycket.

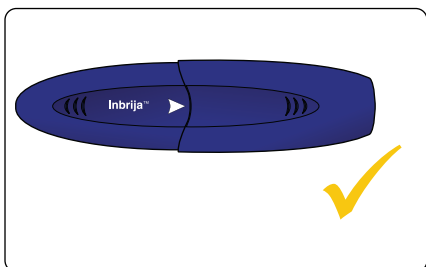

Inhalatorn är nu redo att förvaras.

Denna bruksanvisning är baserad på bipacksedeln för Inbrija.

Inbrija (levodopa) 33 mg inhalationspulver, hårda kapslar, Rx. Varje hård kapsel innehåller 42 mg levodopa. Varje avgiven dos innehåller 33 mg levodopa. Inbrija används för att behandla försämring av symtom under "off perioder" hos vuxna patienter med Parkinsons sjukdom. Inbrija är endast avsett för inhalation, får inte sväljas.

Varningar och försiktighet: Använd inte Inbrija om du har trångvinkelglaukom, sällsynt tumör i binjuren som kallas feokromocytom, om du tidigare har haft neuroleptiskt malignt syndrom eller icke traumatisk rabdomyolys eller om du har tagit läkemedel som kallas icke selektiva MAO hämmare för behandling av depression under de senaste 14 dagarna. Tala med läkare eller apotekspersonal om du utvecklar något av följande symtom när du använder Inbrija: plötsliga sömnattacker, förändringar eller försämring av ditt psykiska tillstånd, hallucinationer, försämring av andningssymtom eller en luftvägsinfektion, drifter eller begär att bete dig på ett sätt som är ovanligt för dig, onormala kroppsrörelser, eller misstänkta svulster eller märken på huden som kan vara melanom. Sök omedelbart läkare om du drabbas av skakningar, oro, förvirringstillstånd, feber, snabb puls eller yrsel och svimning när du reser dig upp eller om du märker att musklerna blir mycket stela eller börjar rycka kraftigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning: Behandling med Inbrija rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Kvinnor ska inte amma under behandling med Inbrija.

Körförmåga och användning av maskiner: Inbrija kan orsaka omfattande dåsighet, yrsel och plötsliga sömnattacker. Om detta händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Kontaktuppgifter: Merz Therapeutics Nordics AB, Gustav III S Boulevard 32, 169 73 Solna, Tel: +468368000. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Texten senast uppdaterad: 05 2025**



THERAPEUTICS

Merz Therapeutics Nordics AB
Gustav III:s Boulevard 32, 169 73 Solna, Sverige
nordics.office@merz.com

M-INB-SE-0003 06/25